

# UpDate!


1896 **SCHWERT**  
**SWORD** SYNONYM FÜR QUALITÄT & VERTRAUEN  
SYNONYM FOR QUALITY & TRUST



## Kronenspreizzange · Crown Spreader

Modern Therapy · Modern Instruments

**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

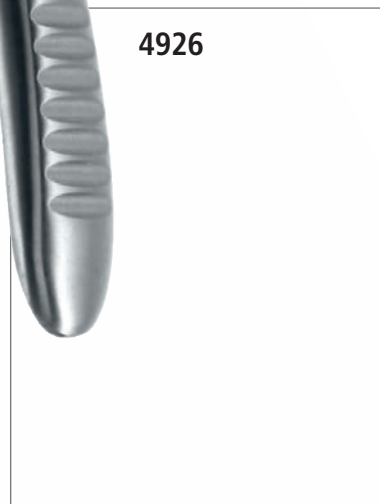

4926



**SCHWERT**  
SWORD · ESPADA  
EPEE · SPADA

UpDate!

## Kronenspreizzange · Crown Spreader

Modern Therapy · Modern Instruments

Mit der SCHWERT Kronenspreizzange werden Rotationskräfte beim Spreizen der Krone zuverlässig verhindert, zum Schutz der darunter liegenden Wurzel und des Nervs.

Mit dem Kronentrenner wird die zu entfernende Krone geschlitzt. Die Spreizfunktion der Zange garantiert eine sichere und anatomisch korrekte Anwendung. Die Zange wird je nach Anbringung des Schlitzes von okklusal, bukkal oder lingual in den Schlitz eingesetzt. Durch Zusammendrücken der Zange, wird die Krone aufgespreizt.

Vorteil dieses Instruments, keine Rotation an der Wurzel.

With the SCHWERT crown spreader it is possible to spread off crowns without the disturbing rotation on the root underneath, in order to protect the nerve, when removing a crown.

Usually the crown is getting slighted with a burr. The crown spreading plier is perfectly designed for spreading off crowns without pressure on the root underneath or the neighbor teeth, as happened with standard crown spreaders. Insert the plier into the slight, according to the position from occlusal, buccal or lingual.

The crown is getting spreaded by compressing the plier.



**4926**

Kronenspreizzange  
Crown Spreader  
14,5 cm

Bestellen Sie per Fax an +49 7464 98910-719  
oder online unter [www.schwert.com](http://www.schwert.com)  
Order by fax to +49 7464 98910-719  
or online at: [www.schwert.com](http://www.schwert.com)

Firma/Praxis - Company / Practice

Adresse - Address

Plz/Ort - Postal Code / City

Datum - Date

Depot - Dealer

Tel./Fax - Phone / Fax

Unterschrift - Signature